


**2007**

São Paulo - maio

Nrº 018

Sistema de Obtenção de Água Grau Farmacêutico com Eletrodeionização

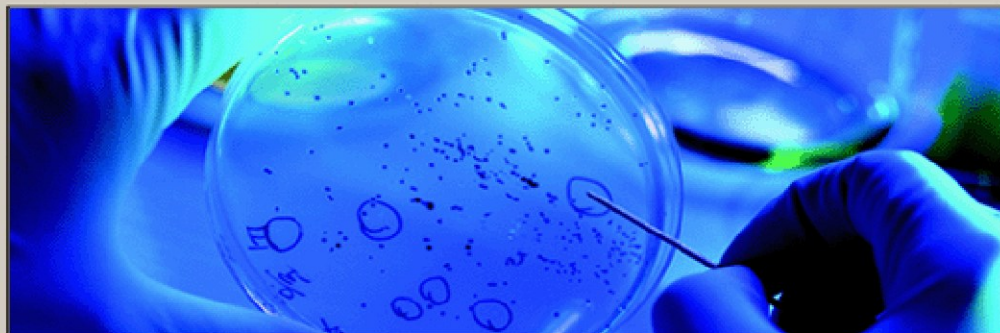

Módulo
Eletrodeionizador

*Tubulações, conexões e válvulas
construídas em AISI 316L - A270
com polimento interno e externo*

Qualidade Constante da Água.

Utilizado para formulação de medicamentos em Indústrias Farmacêuticas.

Equipamento totalmente automatizado.

Painel de Controle com Indicação de Condutividade, Temperatura e opcionais como: Total de Carbono Orgânico, Medidor de pH e IHM via *Display Touch Screen*.

Osmose Reversa com Indicação de Vazão e Pressão.

Luzes indicadoras das fases do processo.

Pré Tratamento:

- Filtro de Areia e Filtro de Carvão com retro-lavagens automáticas.
- Abrandador com regeneração automática.

Polimento Final:

- Eletrodeionizador, moderna tecnologia cuja regeneração acontece continuamente, obtendo água com qualidade estável, facilitando a validação do processo.
- Luz Ultravioleta com dupla ação, germicida e redução de TOC.
- Filtro Microbiológico para retenção de endotoxinas.

O Sistema inclui:

- Programa da Garantia da Qualidade Total - Plano de Visitas Técnicas e Manutenção Preventiva durante o primeiro ano.
- Todos os consumíveis.
- Análise das amostras coletadas em vários pontos do sistema.

Fornecido com documentação completa:

- Qualificação de Instalação.
- Qualificação de Operação.
- Certificados de Calibração dos Instrumentos de Medidas.
- Certificados dos Materiais.



Ind. e Com. Eletro Eletrônica Gehaka Ltda - Av. Duquesa de Goiás, 235 - Real Parque - São Paulo - SP
Teleendas: 11 2165 1100 - Fax: 11 3758 0727 - www.gehaka.com.br - vendas@gehaka.com.br

Para cancelar o recebimento dos nossos informativos e excluir seu e-mail do nosso banco de dados favor responder esse e-mail com o assunto: REMOVER